

Beüzemelési utasítás mikroszkópokhoz

1. Bevezetés



Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TME-nél vásárolt. Környezettudatos szemléletünk megnyilvánulásként átadjuk Önnek ezt a rövidített használati utasítást. Kérjük, hogy a berendezéssel végzendő munka megkezdése előtt szíveskedjen azt figyelmesen elolvasni. Lépjen be a www.tme.eu-ra.

A rövidített használati utasításban szereplő rajzok csak illusztrációk, és eltérhetnek a tárgy tényleges kinézetétől, de ez nem befolyásolja a termék alapvető tulajdonságait.

2. Rendeltetés


Szabad szemmel általában nem látható, kicsi tárgyak megfigyelésére szolgáló berendezés.

3. Felkészülés a munkára és használat

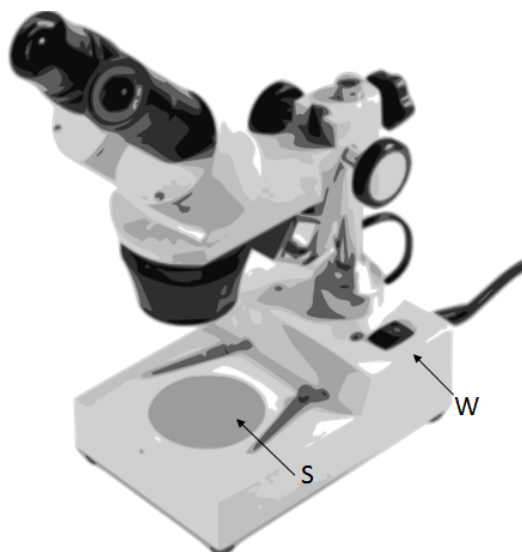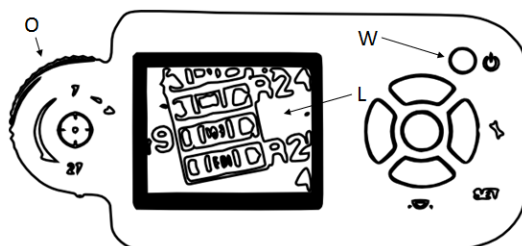

TME Hungary Kft.

Hungaria korut 162 1146 Budapest Adóazonosító:
14474345-2-42 Statisztikai számjel: 14474345-4652-113-01

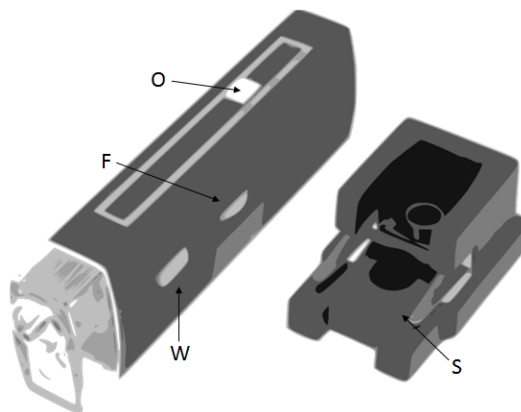

F - élesség

L - LCD kijelző

O - optikai zoom

S - állvány a megfigyelendő tárgy rögzítőivel

W - tápfeszültség bekapcsoló

- Az asztali mikroszkópot stabilan állítsa sima felületre.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a készüléken lévő aljzatba, ha van ilyen a készüléken.
- Helyezze el mikroszkópos preparátumot a tartóban, ha van ilyen a készüléken.
- Kapcsolja be a készüléket a nyomógomb segítségével.
- Állítsa be a nagyítást és az élességet, majd figyelje meg a tárgyat az asztali mikroszkóp okulárján keresztül vagy - kézi mikroszkóp esetén - a kijelzőn.

4. Biztonsági szempontok

- A munka végeztével minden esetben távolítsa el a vizsgált tárgyat.
- Elektromos mikroszkópok esetén mindig válassza le a tápkábelt.
- A mikroszkópot csak száraz helyiségben használja.
- A mikroszkóp optikai elemeinek és látásunk védelme érdekében különös óvatosságra van szükség, ha a mikroszkópot napfénnel bevilágított helyen használjuk.
- A mikroszkóp fém felületeinek tisztításához enyhén nedves törlőruha használható.
- Az optikai részek tisztításához csak száraz, nagyon puha (mikroszálas) törlőruhát szabad használni.
- A lerakódott port puha ecsettel távolítsuk el.
- A mikroszkópházat nem szabad megbontani!